

Kombikod

Remitterande läkare

Personnummer/rikskod (om handskrivet)

Läkarkod

Annans betalare (namn/kombikod)

Provtagningsstid

Månad

Timme

Dag

Minuter

Provtagarens sign

**Önskade analyser i urin
(gul etikett)**

- U-Amfetamin / Ecstasy
- U-Bensodiazepiner
- U-Buprenorfin
- U-Cannabis
- U-GHB
- U-Heroin / Morfin
- U-Kokain
- U-Metadon
- U-Tramadol

**Önskade multianalyser i urin
(gul etikett)**

- U-Anabola androgena steroider*
- U-Internetdroger*
- U-Missbruksläkemedel*
- U-Växt- och svampdroger*

* För information om vilka substanser som ingår se www.karolinska.se/provtagnings-anvisningar

**Önskade analyser i saliv
(munhålevätska), Quantisal
(röd etikett)**

- Amfetamin
- Bensodiazepiner
- Cannabis
- Heroin / Morfin
- Kokain
- Metamfetamin / Ecstasy

**Önskade analyser i utandningsluft
(blå etikett)**

- Amfetamin / Ecstasy
- Buprenorfin
- Bensodiazepiner
- Heroin / Morfin
- Kokain
- Metadon
- Tramadol



21 0048 0444

**Alkoholmarkör i helblod,
ocentrifugerat EDTA-rör
(lila etikett)**

- Fosfatidyletanol, PEth

**Alkoholmarkör i urin
(gul etikett)**

- U-Etylglukuronid

**Kiral analys i urin för att
påvisa sidomissbruk
vid amfetaminbehandling
(gul etikett)**

- U-Kiralt amfetamin

Anteckningar

ANVISNINGAR

- Remissen läses maskinellt. Fyll därför i den noga.
- Använd inte rödpenna.
- Markera beställda analyser genom att fylla ovalen.
- Gjorda markeringar kan EJ raderas.
- Remissen får vikas på mitten men inte rullas.
- Märk röret med etikett med rätt färg från baksidan av blanketten.
- Sätt etiketten rakt utmed röret.
- Alla urinalyser kan utföras i samma urinprov (10 mL).

3334107034

MISSBRUKSANALYS I URIN


Provlämnaren måste informeras om vilka analyser som ska utföras och ge sitt samtycke till provtagningen.

Det är viktigt att provets identitet säkerställs genom säker provtagning, märkning och förvaring. På grund av risken för manipulation av provet rekommenderas övervakad provtagning.

Vid analys av missbruksmedel utförs först screening, vanligtvis med immunokemisk metod. Positiva prover genomgår därefter verifikation (om inte annat avtalats med laboratoriet) med mer avancerad teknik för att säkert kunna identifiera enskilda substanser.

Kreatinin analyseras alltid utan extra kostnad i urinprover. Vid lågt U-kreatinin (mindre än 2 mmol/L), som följd av ett stort vätskeintag eller manipulativ utspädning av urinen, blir negativa resultat osäkra.

I Socialstyrelsens *Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Medicinska test* finns mer information om analyserna och rekommendationer om deras användning.

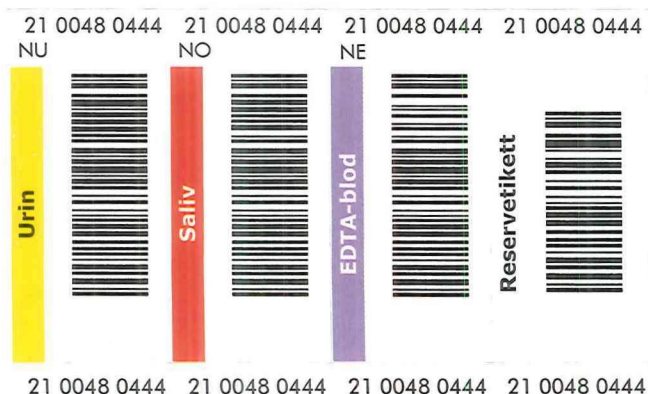

Luftprov. Märkning
av provsamlare

Luftprov. Märkning av provpåse

21 0048 0444 NL

21 0048 0444 NL

